


BABYWAAGE S212



Marke: Scaleson

- Baby- und Kleinkindwaage
- Abnehmbare Babyschale
- Höchstlast 20/100 kg, Ziffernschritt 10/50 g
- Gut ablesbares LC-Display

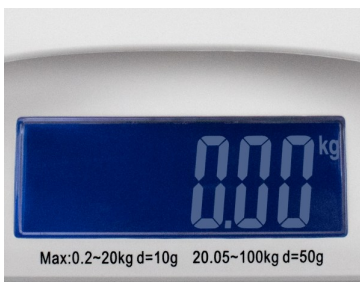

Beschreibung

Die einfache und intuitive Bedienung, die Tara- und Speicherfunktion sowie die einfach zu reinigende Konstruktion machen die Babywaage S212 zum beliebten Begleiter von Hebammen, Eltern und Geburtshäusern. Das Highlight dieser Waage ist die abnehmbare Babyschale. Somit können auch Kleinkinder im Stehen oder Sitzen auf der Waage gewogen werden.

- 2 in 1 Baby- und Kleinkindwaage in modernem Design
- Mehrbereichswaage: Im Bereich bis 20 kg wird in 10 g Schritten gewogen. Ab 20 kg Belastung kann mit der Waage in 50 g Schritten gewogen werden
- Leicht abnehmbare Babyschale
- Nutzung als Kleinkindwaage mit hochwertiger Glasoberfläche

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...




Zuhause

In den ersten Lebensjahren wächst Ihr Baby besonders schnell. Um diese Entwicklung auch Zuhause stets im Blick zu haben, ist die Scaleson Babywaage S212 der geeignete Wegbegleiter. Dabei zeichnet sich die Babywaage besonders durch die einfache Bedienung, die integrierte Speicherfunktion sowie die abnehmbare Babyschale aus, die eine Verwendung bis zum Kleinkindalter ermöglicht.



In der Apotheke

Manchmal empfiehlt der Kinderarzt oder die Hebamme, die Gewichtsentwicklung des Babys im Auge zu behalten. Viele Apotheken bieten jungen Eltern hierfür die Möglichkeit, sich eine Babywaage für die ersten Wochen und Monate auszuleihen. Durch das geringe Eigengewicht der Waage und die einfache Bedienung eignet sie sich optimal als Leihwaage für Apotheken.

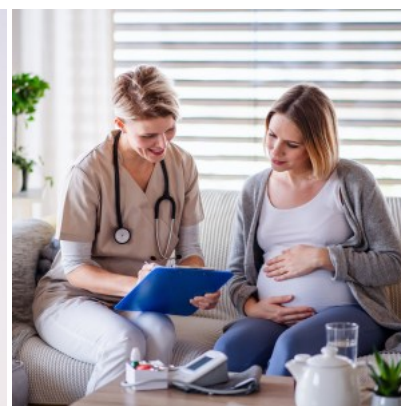

Bei Hebammen


Das Gewicht des Babys gibt Auskunft darüber, wie es sich entwickelt und wie viel Nahrung es wirklich zu sich nimmt. Manchmal ist es wichtig, das Gewicht ganz genau im Auge zu behalten. Regelmäßig wird das Gewicht auch von Hebammen überprüft. Auch hierfür eignet sich die Babywaage S212 hervorragend, da sie aufgrund des geringen Eigengewichts einfach transportiert werden kann und die Speicherfunktion Aufschluss darüber gibt wie sich das Gewicht seit der letzten Messung verändert hat.

Das Besondere an unserer Babywaage S212...



Einfache Bedienung

Mit der Taste „ON/TARE/OFF“ kann die Waage sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Trierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne untergelegte Decken oder Handtücher. Mit der Einheitentaste "UNIT" kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden. Durch Drücken der "MEMORY"-Taste können Sie sich jederzeit das zuletzt ermittelte Gewicht anzeigen lassen.

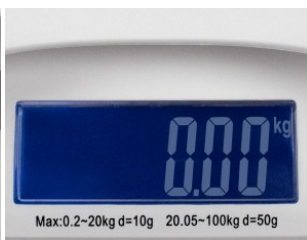

Gut ablesbares Display

Die Scaleson Babywaage S212 hat ein großes und gut ablesbares LCD-Display. Die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Ihnen auch bei schlechten Lichtverhältnissen das problemlose Ablesen der ermittelten Werte.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.



Nutzung als Kleinkindwaage

Das Highlight der Scaleson Baby- und Kleinkindwaage S212 ist die abnehmbare Babyschale. Somit können auch Kleinkinder im Stehen oder Sitzen auf der Waage gewogen werden.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S212.07.100
Abmessungen	530 x 370 x 75 mm
Höchstlast	20 / 100 kg
Ziffernschritt	10 / 50 g
Abmessungen Babyschale	530 x 330 x 75 mm
Abmessungen Waage	320 x 345 x 25 mm
Batterien	4 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)